

| 発注コード | 単品セット名 | セット内容 | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | 製品コード | 製品名 | 最小販売単位 |
| DVS Standard カニューレセット [コシのあるスタンダードタイプ] ※最小販売単位改定 (2023年 4月) | | | | |
| MVA-STD-SET-5 | MVA Standard 5mm セット | DVS-S5-JP SR5-SU-JP5 | Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 5mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 |
| MVA-STD-SET-6 | MVA Standard 6mm セット | DVS-S5-JP SR6-SU-JP5 | Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 6mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 |
| MVA-STD-SET-7 | MVA Standard 7mm セット | DVS-S5-JP SR7-SU-JP5 | Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 7mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 |
| MVA-STD-SET-8 | MVA Standard 8mm セット | DVS-S5-JP SR8-SU-JP5 | Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 8mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 |
| MVA-STD-SET-9 | MVA Standard 9mm セット | DVS-S5-JP SR9-SU-JP5 | Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 9mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 |
| DVS Flex カニューレセット [やわらかいフレキシブルタイプ] ※Flex カニューレを Double Valve アスピレータに接続するには適合するアダプタが必要です (12mm カニューレはアダプタ不要) ※最小販売単位改定 (2023年 4月) | | | | |
| MVA-FLX-SET-5 | MVA Flex 5mm セット | DVS-S5-JP FC5-JP5 ADP-6MM-JP | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 5mm 6mm アダプタセット | 5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 青色 |
| MVA-FLX-SET-6 | MVA Flex 6mm セット | DVS-S5-JP FC6-JP5 ADP-6MM-JP | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 6mm 6mm アダプタセット | 5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 青色 |
| MVA-FLX-SET-7 | MVA Flex 7mm セット | DVS-S5-JP FC7-JP5 ADP-7MM-JP | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 7mm 7mm アダプタセット | 5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 茶色 |
| MVA-FLX-SET-8 | MVA Flex 8mm セット | DVS-S5-JP FC8-JP5 ADP-8MM-JP | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 8mm 8mm アダプタセット | 5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 白色 |
| MVA-FLX-SET-9 | MVA Flex 9mm セット | DVS-S5-JP FC9-JP5 ADP-9MM-JP | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 9mm 9mm アダプタセット | 5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 こげ茶色 |
| MVA-FLX-SET-10 | MVA Flex 10mm セット | DVS-S5-JP FC10-JP5 ADP-10MM-JP | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 10mm 10mm アダプタセット | 5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 濃緑色 |
| MVA-FLX-SET-12 | MVA Flex 12mm セット | DVS-S5-JP FC12-JP5 | Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 12mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 |
| SVS セット ※最小販売単位改定 (2023年 4月) | | | | |
| MVA-SVS-SET-3 | MVA SVS 3mm セット | SVS-S5-JP EB3-JP5 | Single Valve アスピレータ MVA Biopsy カニューレ 3mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 コシのある硬めタイプ |
| MVA-SVS-SET-4 | MVA SVS 4mm セット | SVS-S5-JP FC4-JP5 | Single Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 4mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 やわらかいフレキシブルタイプ |
| MVA-SVS-SET-5 | MVA SVS 5mm セット | SVS-S5-JP FC5-JP5 | Single Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 5mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 やわらかいフレキシブルタイプ |
| MVA-SVS-SET-6 | MVA SVS 6mm セット | SVS-S5-JP FC6-JP5 | Single Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 6mm | 5本 / 箱 5本 / 袋 やわらかいフレキシブルタイプ |
| MVA キット | | | | |
| MVA-KIT-JP5 | MVA キット | | <ul style="list-style-type: none"> • Double Valve アスピレータ 1本 • MVA Standard カニューレ 4本 (6-9mm 各 1本) • Dennison ダイレクタ 3本 (5/6mm, 7/8mm, 9/10mm 各 1本) | 5キット / 箱 |

Double Valve
アスピレータ
セット

Single Valve
アスピレータ
セット

MVA キット

販売名: Women's MVA システム
 一般的名称: 吸引用子宮カテーテル/単回使用医療用拡張器
 医療機器認証番号: 227ADBZX00175000
 クラス分類: 管理医療機器

- ご使用の際は、電子添文をよくお読みの上、正しくお使いください
- アスピレータ単品やカニューレ単品では販売しておりません
- 手動真空吸引法の実施には MVA の「アスピレータ」と「カニューレ (+アダプタ)」を一对で使用し、1 回限りで使い捨て再使用しないでください
- 「K909 1-イ 流産手術 (妊娠 11 週までの場合) 手動真空吸引法によるもの: 4,000 点」が適用されます
- その他の適用: 「K909-2 子宮内容除去術 (不全流産): 1,980 点」「K911 胎状奇胎除去術: 4,120 点」

Ipas MVA Technology

Ipas MVA 製品は 1970 年代に米国 Ipas 社によって開発されました。FDA 認可、CE マーク、ISO13485 等、規制当局の認可を取得し、40 年以上にわたり世界 100 以上国で使用されています。Women's MVA システムは Ipas MVA 製品です。




“Ipas” 刻印の例

手動真空吸引法 Women's MVA システム

手動で真空状態を作り、子宮内容物・子宮内膜組織を吸引、除去又は採取します

MVA 単品セット

目的や症例に応じて
組み合わせ*を選択できます

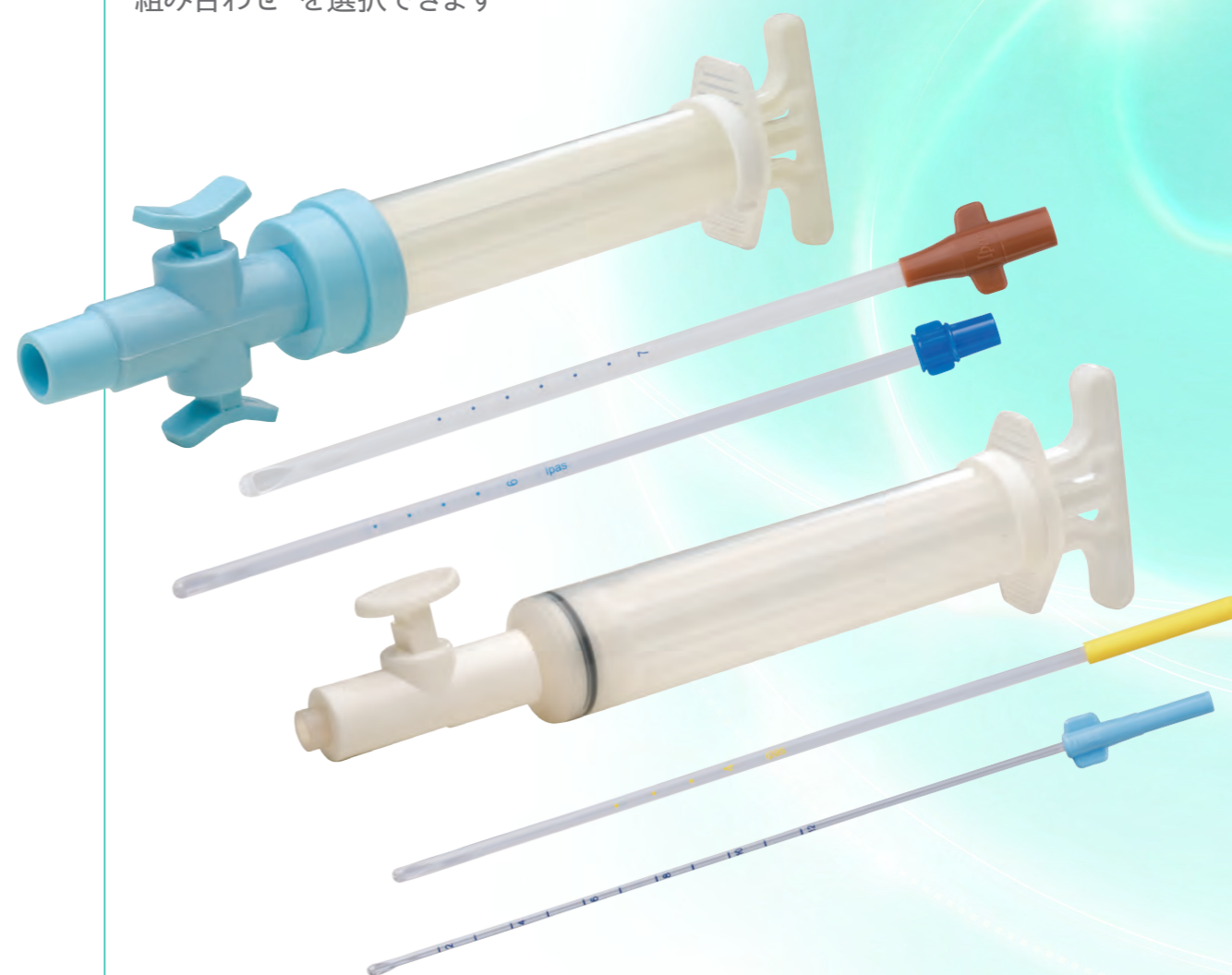

*単品セットはアスピレータ 1 箱とカニューレ 1 箱の組み合わせです

Ipas MVA Technology

製造販売業者



Women's Health Japan

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第8菊星タワービル2F
 www.womenshealthjapan.com
 【製品に関するお問合せTEL】03-6240-9611

外国製造業者

WomanCare Global (米国)



WHJ-PC0015-ALL/2023.02(3K)-C-N

手動真空吸引法

Women's MVA システム

- 妊娠週数や目的に応じてカニューレを選択できます
- 手元のシリンジで吸引した内容物・組織を視認できます
- 安全に配慮した滅菌済み単回使用製品*
清潔環境下での内容物・組織の採取を実現します
患者様や医療スタッフの皆様の感染対策をします
- ラテックスフリー素材を採用
ラテックスアレルギーの患者様にも使用できます
- 救急時、災害時にも対応できる手動吸引式

Single Valve アスピレーター

- Single Valve アスピレーター : 60cc



- MVA Biopsy カニューレ [コシのある硬めタイプ]




- MVA Flex カニューレ [やわらかいフレキシブルタイプ]



❶ 子宮内膜組織採取に用いる場合は、妊娠の可能性のある人には使用しないでください

Double Valve アスピレーター


- Double Valve アスピレーター : 60cc

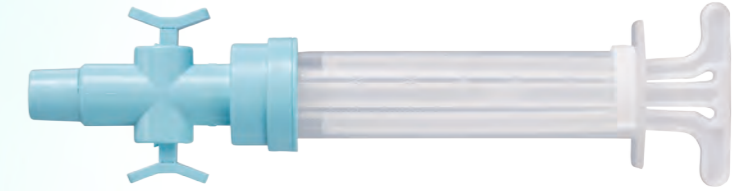

- MVA Standard カニューレ [コシのあるスタンダードタイプ]



- MVA Flex カニューレ [やわらかいフレキシブルタイプ]

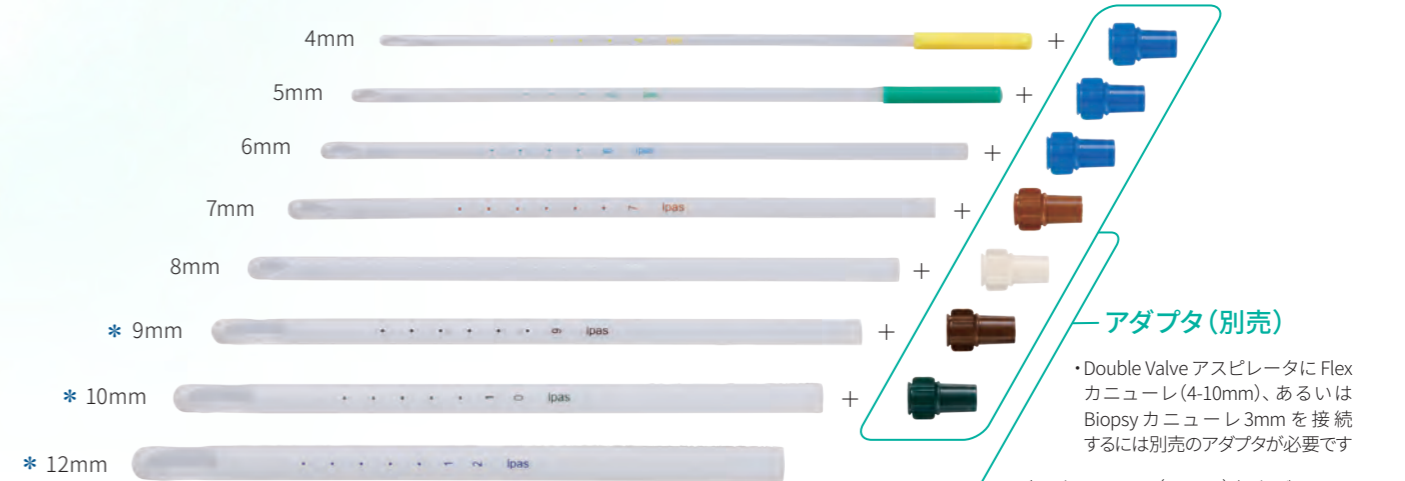

- MVA Biopsy カニューレ [コシのある硬めタイプ]



先端開口部



*印のカニューレの開口部は1カ所、それ以外は2カ所

使用するカニューレと妊娠週数の目安

| サイズ | 妊娠週数 |
|------|---------|
| 4mm | 4-5 週 |
| 5mm | 5-6 週 |
| 6mm | 6-7 週 |
| 7mm | 7-8 週 |
| 8mm | 8-9 週 |
| 9mm | 9-10 週 |
| 10mm | 10-11 週 |
| 12mm | -12 週 |

※アダプタは用時滅菌品です

【推奨滅菌条件】

滅菌方法：オートクレーブ

滅菌条件：121°C30 分

乾燥条件：121°C以下で 20 分以内

オートクレーブの仕様により乾燥条件が設定できない場合は乾燥工程を省略してください。機器の設定方法は各機器の製造業者にお問い合わせください