

「MVA 単品セット」 最小包装単位変更（10 本入から 5 本入）のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日は MVA 単品セットにつきまして、最小包装単位変更のお知らせを申し上げます。
これまで多くの先生方からいただいていたご要望にお応えするとともに、社会情勢の変化にも対応できるように、4月1日より5入包装製品（5本/箱もしくは袋）を販売いたします。これに伴い、現行の10入包装製品（10本/箱）は3月31日をもって販売終了させていただきます。何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

本変更に合わせて、アスピレータおよびカニューレの二次包装を下記のとおり変更しております。
また、5入包装製品およびその単品セットの製品コードが変更されます。詳しくはカタログをご覧ください。販売単位はアスピレータ1箱に対してカニューレ1袋が基本となりますが、これまで同様、同時注文の場合に限り、オプションとして別サイズのカニューレ1種類を1袋ご購入いただけます。

引き続きご高配の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品	二次包装：変更前	二次包装：変更後	
<ul style="list-style-type: none"> ・ DVS Standard カニューレセット (5mm～9mm セット) ・ DVS Flex カニューレセット (5mm～10, 12mm セット) ・ SVS セット (3mm～6mm セット) 	<p>●アスピレータ（10 本入り）箱</p>  <p>外寸(mm) 長さ 330 x 幅 170 x 高さ 160</p>	<p>●アスピレータ（5 本入り）箱</p>  <p>外寸(mm) 長さ 330x 幅 170x 高さ 125</p>	
	<p>●カニューレ(10 本入り) 箱</p>  <p>外寸(mm) 長さ 330 x 幅 80 x 高さ 80</p>	<p>●カニューレ（5 本入り）緩衝袋</p>  <p>外寸(mm) 長さ 330 x 幅 165 高さ約 20</p>	

以上

※ 本件に関する問い合わせ

[Email] whj-info@womenshealthjapan.com

[TEL] 03-6240-9611（営業時間：9:00-18:00）

包装単位変更(5本入り):2023年4月1日より

発注コード	単品セット名	セット内容			最小販売単位
		製品コード	製品名		
DVS Standard カニューレセット [コシのあるスタンダードタイプ]					※最小販売単位改定 (2023年4月)
MVA-STD-SET-5	MVA Standard 5mm セット	DVS-S5-JP SR5-SU-JP5	Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 5mm	5本 / 箱 5本 / 袋	
MVA-STD-SET-6	MVA Standard 6mm セット	DVS-S5-JP SR6-SU-JP5	Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 6mm	5本 / 箱 5本 / 袋	
MVA-STD-SET-7	MVA Standard 7mm セット	DVS-S5-JP SR7-SU-JP5	Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 7mm	5本 / 箱 5本 / 袋	
MVA-STD-SET-8	MVA Standard 8mm セット	DVS-S5-JP SR8-SU-JP5	Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 8mm	5本 / 箱 5本 / 袋	
MVA-STD-SET-9	MVA Standard 9mm セット	DVS-S5-JP SR9-SU-JP5	Double Valve アスピレータ MVA Standard カニューレ 9mm	5本 / 箱 5本 / 袋	
DVS Flex カニューレセット [やわらかいフレキシブルタイプ]					※最小販売単位改定 (2023年4月)
※ Flex カニューレを Double Valve アスピレータに接続するには適合するアダプタが必要です (12mm カニューレはアダプタ不要)					
MVA-FLX-SET-5	MVA Flex 5mm セット	DVS-S5-JP FC5-JP5 ADP-6MM-JP	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 5mm 6mm アダプタセット	5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 青色	
MVA-FLX-SET-6	MVA Flex 6mm セット	DVS-S5-JP FC6-JP5 ADP-6MM-JP	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 6mm 6mm アダプタセット	5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 青色	
MVA-FLX-SET-7	MVA Flex 7mm セット	DVS-S5-JP FC7-JP5 ADP-7MM-JP	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 7mm 7mm アダプタセット	5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 茶色	
MVA-FLX-SET-8	MVA Flex 8mm セット	DVS-S5-JP FC8-JP5 ADP-8MM-JP	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 8mm 8mm アダプタセット	5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 白色	
MVA-FLX-SET-9	MVA Flex 9mm セット	DVS-S5-JP FC9-JP5 ADP-9MM-JP	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 9mm 9mm アダプタセット	5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 こげ茶色	
MVA-FLX-SET-10	MVA Flex 10mm セット	DVS-S5-JP FC10-JP5 ADP-10MM-JP	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 10mm 10mm アダプタセット	5本 / 箱 5本 / 袋 5個 / 袋 濃緑色	
MVA-FLX-SET-12	MVA Flex 12mm セット	DVS-S5-JP FC12-JP5	Double Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 12mm	5本 / 箱 5本 / 袋	
SVS セット					※最小販売単位改定 (2023年4月)
MVA-SVS-SET-3	MVA SVS 3mm セット	SVS-S5-JP EB3-JP5	Single Valve アスピレータ MVA Biopsy カニューレ 3mm	5本 / 箱 5本 / 袋 コシのある硬めタイプ	
MVA-SVS-SET-4	MVA SVS 4mm セット	SVS-S5-JP FC4-JP5	Single Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 4mm	5本 / 箱 5本 / 袋 やわらかいフレキシブルタイプ	
MVA-SVS-SET-5	MVA SVS 5mm セット	SVS-S5-JP FC5-JP5	Single Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 5mm	5本 / 箱 5本 / 袋 やわらかいフレキシブルタイプ	
MVA-SVS-SET-6	MVA SVS 6mm セット	SVS-S5-JP FC6-JP5	Single Valve アスピレータ MVA Flex カニューレ 6mm	5本 / 箱 5本 / 袋 やわらかいフレキシブルタイプ	
MVA キット					
	製品コード	製品名	キット内容	最小販売単位	
	MVA-KIT-JP5	MVA キット	• Double Valve アスピレータ 1本 • MVA Standard カニューレ 4本 (6-9mm 各1本) • Denniston ダイレタ 3本 (5/6mm, 7/8mm, 9/10mm 各1本)	5 キット / 箱	

販売名: Women's MVA システム
 一般名称: 吸引用子宮カテーテル/単回使用医療用拡張器
 医療機器認証番号: 227ADBZX00175000
 クラス分類: 管理医療機器

- ご使用の際は、電子添文をよくお読みの上、正しくお使いください
- アスピレータ単品やカニューレ単品では販売しておりません
- 手動真空吸引法の実施には MVA の「アスピレータ」と「カニューレ (+アダプタ)」を一対で使用し、1回限りで使い捨て再使用しないでください
- 「K909 1-イ 流産手術 (妊娠 11 週までの場合) 手動真空吸引法によるもの: 4,000 点」が適用されます
- その他適用: 「K909-2 子宮内容除去術 (不全流産): 1,980 点」「K911 胎状奇胎除去術: 4,120 点」

Ipas MVA Technology

Ipas MVA 製品は 1970 年代に米国 Ipas 社によって開発されました。
 FDA 認可、CE マーク、ISO13485 等、規制当局の認可を取得し、40 年以上にわたる世界 100 カ国以上で使用されています。
 Women's MVA システムは Ipas MVA 製品です。




"Ipas" 刻印の例

手動真空吸引法 Women's MVA システム

手動で真空状態を作り、子宮内容物・子宮内膜組織を吸引、除去又は採取します

MVA 単品セット

目的や症例に応じて
 組み合わせ*を選択できます

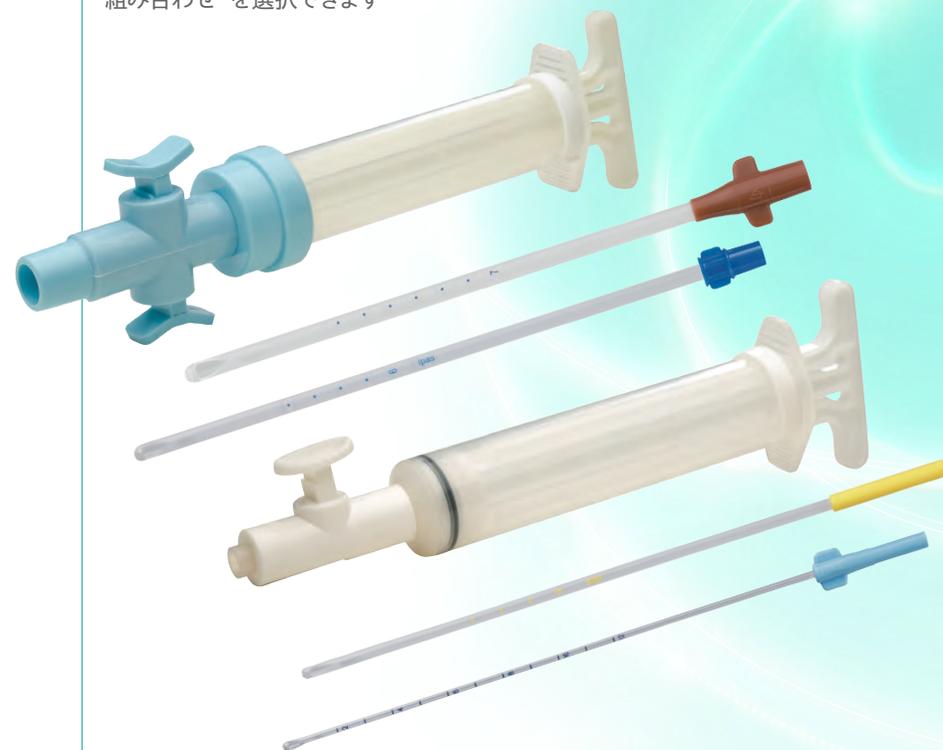

*単品セットはアスピレータ1箱とカニューレ1箱の組み合わせです

Ipas MVA Technology



手動真空吸引法

Women's MVA システム

- 妊娠週数や目的に応じてカニューレを選択できます
- 手元のシリンジで吸引した内容物・組織を視認できます
- 安全に配慮した滅菌済み単回使用製品*
清潔環境下での内容物・組織の採取を実現します
患者様や医療スタッフの皆様の感染対策をします
- ラテックスフリー素材を採用
ラテックスアレルギーの患者様にも使用できます
- 救急時、災害時にも対応できる手動吸引式

Single Valve アスピレータ

- Single Valve アスピレータ：60cc



- MVA Biopsy カニューレ [コシのある硬めタイプ]



- MVA Flex カニューレ [やわらかいフレキシブルタイプ]



① 子宮内膜組織採取に用いる場合は、妊娠の可能性のある人には使用しないでください

Double Valve アスピレータ


- Double Valve アスピレータ：60cc



- MVA Standard カニューレ [コシのあるスタンダードタイプ]



- MVA Flex カニューレ [やわらかいフレキシブルタイプ]

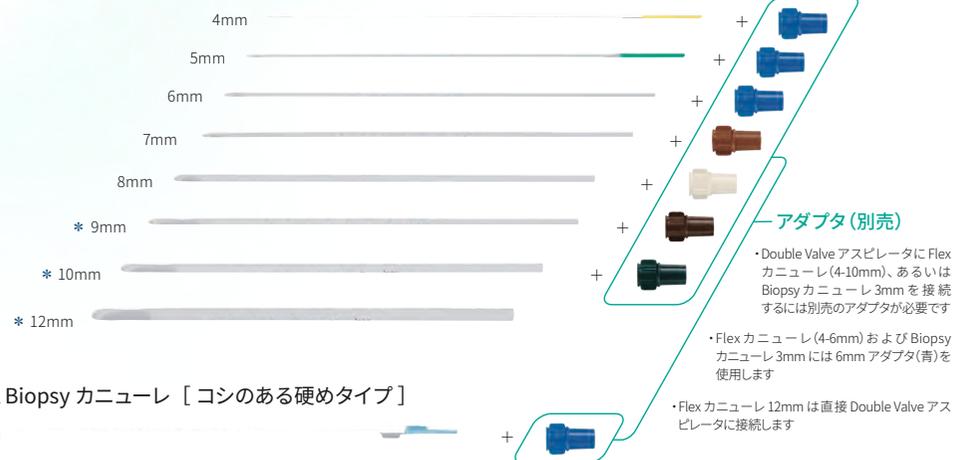


アダプタ (別売)
・Double Valve アスピレータに Flex カニューレ (4-10mm)、あるいは Biopsy カニューレ 3mm を接続するには別売のアダプタが必要です

・Flex カニューレ (4-6mm) および Biopsy カニューレ 3mm には 6mm アダプタ (青) を使用します

・Flex カニューレ 12mm は直接 Double Valve アスピレータに接続します

先端開口部

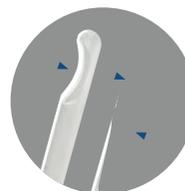

*印のカニューレの開口部は 1カ所、それ以外は 2カ所

使用するカニューレと妊娠週数の目安

サイズ	妊娠週数
4mm	4-5 週
5mm	5-6 週
6mm	6-7 週
7mm	7-8 週
8mm	8-9 週
9mm	9-10 週
10mm	10-11 週
12mm	-12 週

*アダプタは用時滅菌品です

【推奨滅菌条件】

滅菌方法：オートクレーブ

滅菌条件：121°C 30 分

乾燥条件：121°C 以下で 20 分以内

オートクレーブの仕様により乾燥条件が設定できない場合は乾燥工程を省略してください。機器の設定方法は各機器の製造業者にお問い合わせください